



**Mini centrifugeuse  
vétérinaire  
FUGEVET**

mini-centrifugeuse pour vétérinaire FUGEVET

## mini-centrifugeuse pour vétérinaire: **FUGEVET**

La mini centrifugeuse Fugevet est spécialement conçue pour le secteur vétérinaire. Aux rotors angulaire et à bande communément utilisés sur ce type de mini centrifugeuse, est ajouté un rotor pour tubes à micro-hématocrite adapté à la détermination de l'hématocrite du sang animal.

Avec un design léger et compact, son fonctionnement est doux et très silencieux même à hautes vitesses. Elle est fournie d'un système de sécurité électrique dans le couvercle qui permet d'arrêter immédiatement le rotor dans le cas d'une ouverture accidentelle ou involontaire.



## centrifugeuse FUGEVET: Caractéristiques de l'équipement



- [1] Rotor pour 12 tubes micro-hématocrite
- [2] 1 rotor angulaire de capacité 6 micro-tubes de 1.5/2.0 mL avec adaptateurs inclus pour micro-tubes de 0.5 mL et 0.2 mL
- [3] 1 rotor angulaire de capacité 4 cryotubes de 5 mL avec adaptateurs inclus pour cryotubes de 1.3 mL
- [4] Rotor de bandes pour micro-tubes de 0.2 mL
- [5] Léger, très silencieux et stable, fourni avec pieds de ventouse
- [6] Couvercle transparent pour vérifier à tout moment l'état du rotor
- [7] Commutateur 100-240V


[1] Rotor pour 12 tubes micro-hématocrite



[4] Rotor à bandes pour micro-tubes de 0.2 mL




## centrifugeuse FUGEVET: parties de l'appareil

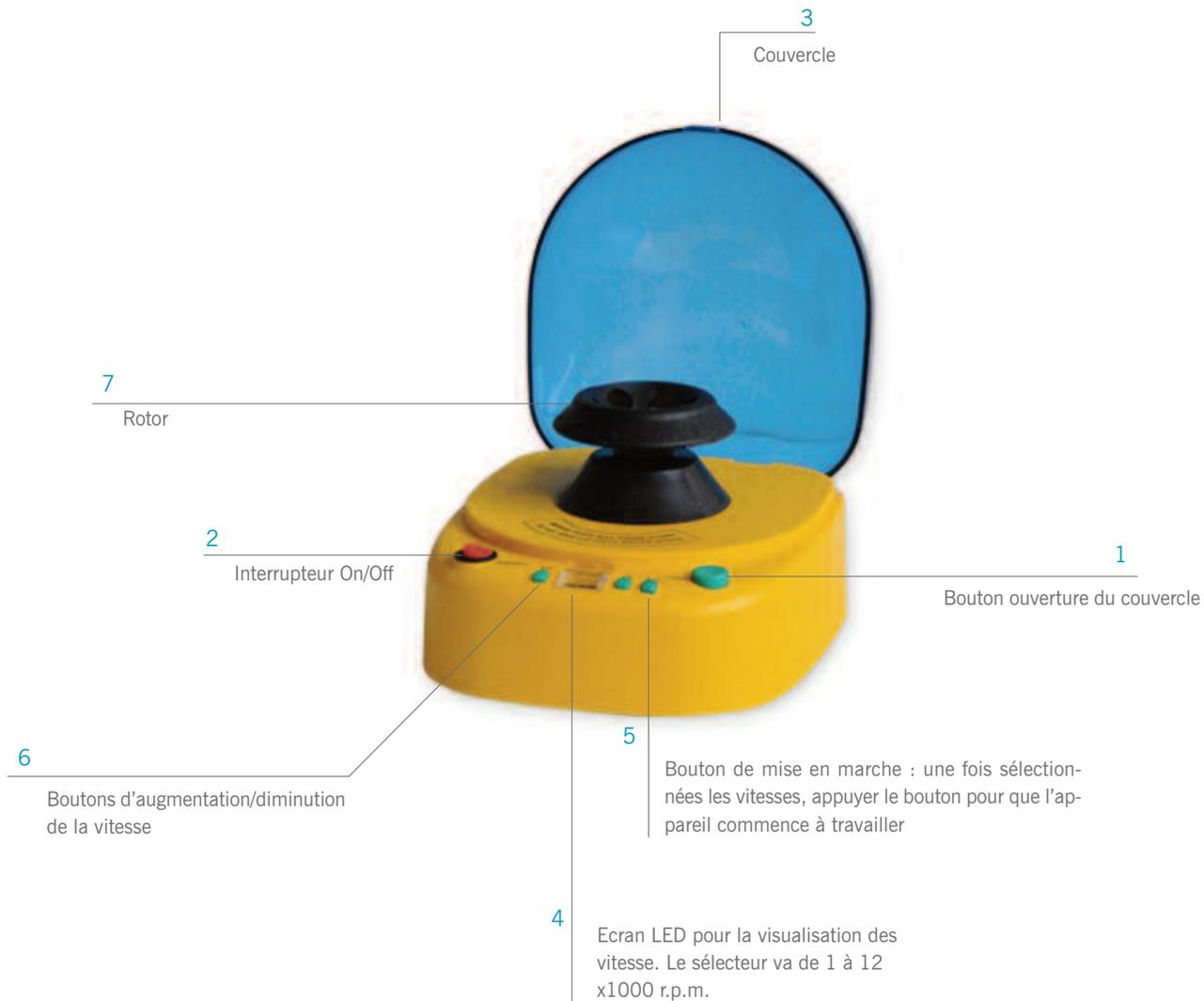

## centrifugeuse FUGEVET: partie arrière



Détail de la prise de courant

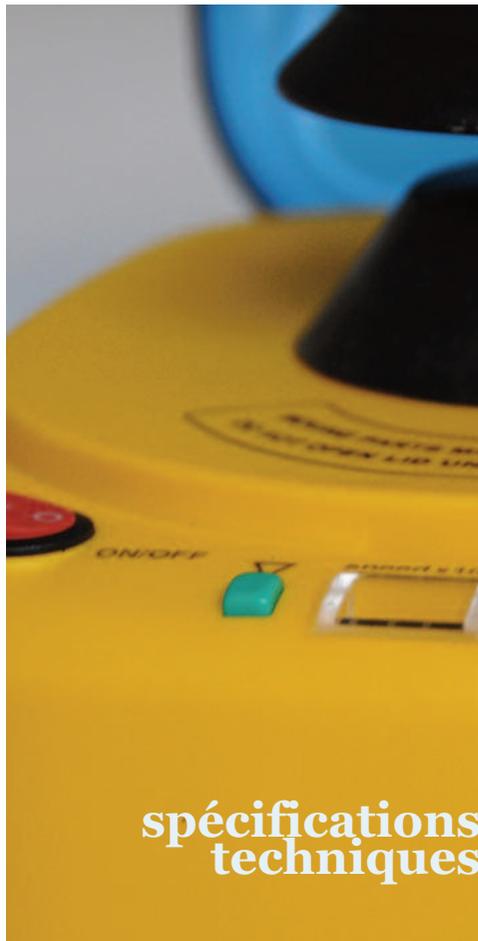

## centrifugeuse FUGEVET: Spécifications techniques

Référence	52507050
Gamme vitesse	1000-12000 rpm (De 1000 en 1000 rpm)
Rotor	Rotor pour 12 tubes micro-hématocrite Rotor pour 6 microtubes : 6 x 1.5mL, 6 x 0.2mL*, 6 x 0.5mL* Rotor pour 4 cryotubes: 4 x 5 mL, 4 x 1.3 mL* Rotor à bandes (8x0,2 mL)
Alimentation	100-240 V AC 50-60Hz
Dimensions approx.	175 x 145 x 130 mm
Poids approx.	1 Kg

\*Avec les adaptateurs inclus

AUXILAB, S.L.

Polígono Morea Norte Calle D Nº 6

31191 Beriain - Navarra - España

T: +34 948 310 513

comercial@auxilab.es

www.auxilab.es

ROGO-SAMPAIC

23 Rue Ampère, ZI de Vilemilan

91325 Wissous - Paris - France

T: +33 1 69 53 67 67

rogosampaic@rogosampaic.com

www.rogosampaic.com



AUXILAB S.L.

Material de laboratorio  
Laboratory supplies